

OPTIMUS MINI SCREW




Optimus: sistema de microtornillos optimizado

Optimus ofrece un tratamiento más rápido, efectivo y preciso. El sistema puede utilizarse en maxilar o mandíbula como alternativa a métodos de anclaje convencionales.

- ▶ Auto-perforante y auto-roscante, minimiza el uso de fresas piloto o incisiones
- ▶ Collar protector de mucosa
- ▶ Zona transmucosa (1.5mm) lisa y pulida para evitar inflamaciones
- ▶ El diseño de rosca invertida mejora la resistencia a la tracción
- ▶ Punto de fractura elevado que evita roturas de tornillo
- ▶ Doble sección de corte y descarga, ideal para inserción en hueso duro
- ▶ La cabeza hexagonal del microtornillo ayuda a una fácil separación del driver
- ▶ Biocompatible, Titanio Grado 23: TiAl6V4 ELI, Norma ASTM F136-98

RECURSOS MÉDICOS, SL
Tel: (+34) 96 342 0478
info@recursosmedicos.com
www.recursosmedicos.com/orto



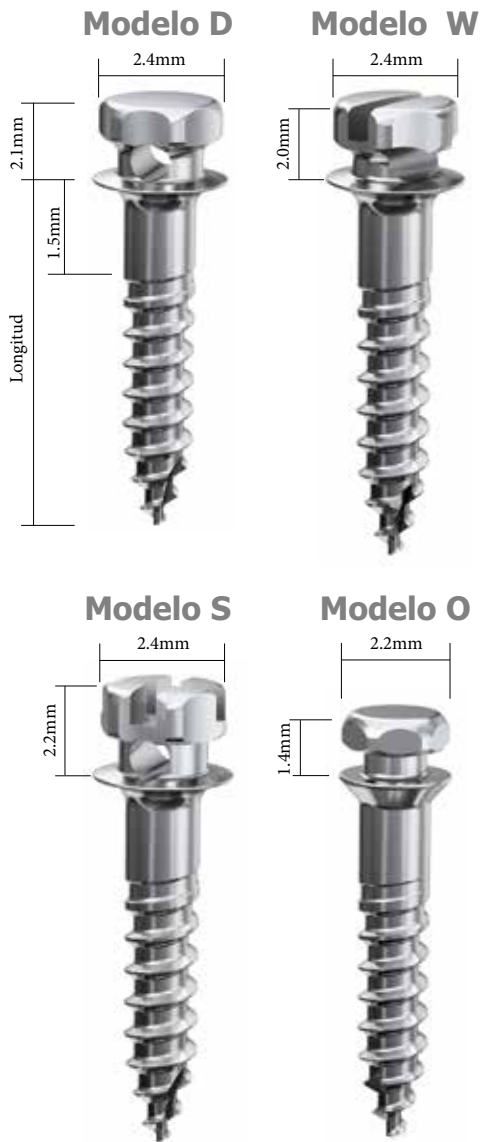

Diámetro ø [mm]	Longitud [mm]	Modelo D Agujero	Modelo W Ranura	Modelo S Cruz y Agujero	Modelo O Bajo Perfil
1.4	6.0	D11406	W11406	S21406	
	7.0	D11407	W11407		
	8.0	D11408	W11408	S21408	
				S21410	
1.6	6.0	D11606	W11606	S21606	O11606
	7.0	D11607	W11607		O11607
	8.0	D11608	W11608	S21608	O11608
	9.0	D11609	W11609		O11609
	10.0	D11610	W11610	S21610	O11610
	11.0	D11611	W11611		O11611
1.8	6.0	D11806	W11806	S21806	
	7.0	D11807	W11807		
	8.0	D11808	W11808	S21808	
	9.0	D11809	W11809		
	10.0	D11810	W11810	S21810	
	12.0			S21812	
2.0	7.0	D12007	W12007		
	8.0	D12008	W12008		
	9.0	D12009	W12009		
	10.0	D12010	W12010		
	11.0	D12011	W12011		
	12.0	D12012	W12012		
	14.0	D12014			
	16.0	D12016			

Algunas medidas podrían no estar disponibles

Microtornillo Tipo D, con agujero de $\varnothing 0.9\text{mm}$, estándar, uso general, para ligadura, cadeneta y coilspring

Microtornillo Tipo W, tipo *Bracket*, ideal para anclaje indirecto, su ranura permite colocar arcos de hasta $.022" \times .0295"$ y ligar como un bracket

Microtornillo Tipo S, con cruz de $.022" \times .0295"$ y agujero de $\varnothing 0.7\text{mm}$, ideal para anclaje indirecto, amplio rango de usos

Microtornillo Tipo O, muy bajo perfil, uso general, para ligadura, cadeneta y coilspring

Instrumental



Contra-ángulo electrónico sin cables, con límite de torque y velocidad ajustables iSD900

